

メディハーモニー ご使用のしおり

medi

mediven® harmony (medi product)

NAK corporation

■メディハーモニーの特徴

- ・ メディハーモニーは、ドイツの医療用弾性ストッキングメーカー、Medi GmbH & Co.KG(メディ社)が開発し、ドイツ医療用品規格に準じて製造された製品です。
ドイツの検査機関である、ホーヘンシュタイン研究所の品質検査合格品(RALマーク付)です。
- ・ メディハーモニーは、一部製品を除き、7サイズ展開です(SS~4L)。
- ・ より伸縮性にすぐれた生地を使用しています。1つの製品で、従来のショート丈・ロング丈許容数値を、おおよそカバーします。
- ・ 肘の内・外側の2カ所の楕円形加工(ダブルエリプス)は、肘周囲におけるしわの形成をおさえ、肘の屈伸時に生じる負担を軽減します。
- ・ 柔らかく快適な着け心地です。ラノリンが含まれお肌にもやさしく、ラテックスフリーの生地です。
- ・ より身体のラインに沿うようデザインし、幅広のワイドタイプもご用意しました。

■ご使用に関して


- ・ 必ず医師にご相談の上、着用してください。
 - ・ 多汗性、脂性のお肌の方は、着用時に天花粉の使用をおすすめします。
 - ・ もし、スリーブにほつれ、糸切れ等が発生しても、その部分は切り取らないでください。伝線、穴あき等の原因になります。ご不明な点はお問い合わせください。
 - ・ 染料の性質上、汗や摩擦により、色落ちしたり、他のものに色移りする恐れがありますのでご注意ください。
- ★ 着用中に、シビレ、痛み、むくみ、腫れなどが発生した場合、また指先が青白くなったり、紫色に変色した場合、腕が発熱あるいは発赤した場合は、直ちに使用を中止し医師にご相談ください。

■洗濯方法


- ・ 手での押し洗いをおすすめします。もみ洗いは避けてください。
洗濯機で洗う場合は、洗濯ネットをご使用の上、液温40℃以下でソフト洗いをしてください。
 - ・ よくすすいだ後、手で軽くしぼり、形を整えて陰干しにしてください。
 - ・ 乾燥機の使用、直射日光は生地を傷めることがありますので、避けてください。
 - ・ 柔軟仕上げ剤や漂白剤、ベンジン等の使用、ドライクリーニング、アイロンがけはしないでください。
 - ・ 洗濯時に多少脱色することがありますので、他の洗濯物との混入はお避け下さい。
- ★ 軟膏、クリーム類を使用しているときは、一日一回、必ず洗ってください。
- ★ ショルダーキャップ・ベルト付スリーブの洗濯時のご注意
ベルト部分のベルクロテープ(マジックテープ)は、留めた状態で洗濯してください。
外した状態で洗濯すると、ベルクロテープがスリーブ本体の生地を傷つけることがあります。

■メディハーモニーの装着方法

1. スリーブの上部をあらかじめ手首の部分まで裏返してください。
2. 爪や指輪などでスリーブを引っ掛けないように注意し、スリーブに手を入れてください。スリーブを引き上げた時に楕円形の加工部分が肘関節の内側にうまく重なるように、あらかじめ方向をそろえて手を入れます。

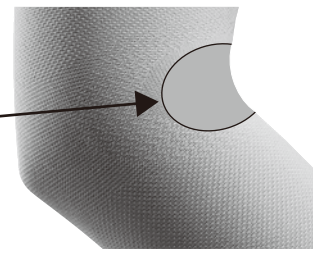


3. 少しずつ引き上げていきます。この時、市販のゴム手袋などを使うとスリーブが引き上げやすくなります。スリーブを腕全体に均等にのばし、しわ、たるみ、よじれができないように丁寧に装着してください。
4. 全体的にしわ、たるみ、よじれができないように注意しながら、最終的にわきの下まで引き上げてください。楕円形の加工部分が、肘関節の内側にうまく重なっていることを確認し、終了です。

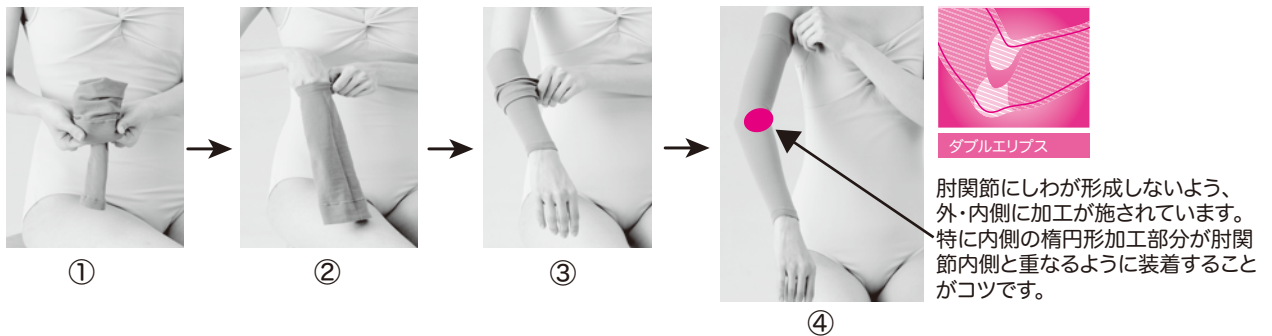

■補助器具を使用した場合の装着方法

1. 補助器具の半円形に開いている部分を、ご自身と反対側に向けて置き、スリーブを補助器具に取り付けます。このとき、楕円形の加工部分が肘関節の内側にうまく重なるようにするため、方向をそろえて取り付けます。(下の写真を参照)
2. フレームにスリーブを均等に広げ、スリーブの口に少しずつ腕を入れていきます。
3. 腕を入れていく過程で、補助器具が動かないように注意し、さらに深く入れていきます。
4. スリーブに腕をある程度深く入れて、補助器具からスリーブをゆっくり抜きます。
5. 全体的にしわ、たるみ、よじれができないように注意しながら、最終的にわきの下まで引き上げてください。楕円形の加工部分が、肘関節の内側にうまく重なっていることを確認し、終了です。

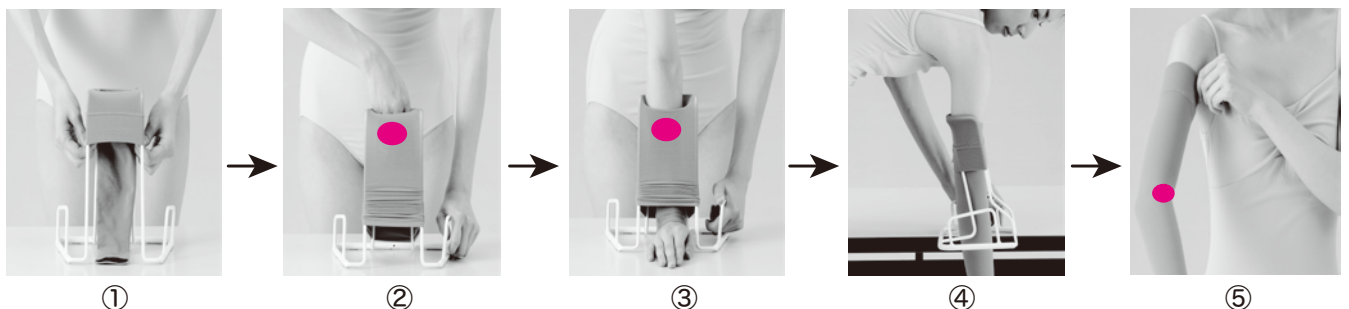

※写真で使用している装着補助器具はメディバトラー(ショートハンドル 900-2)です。詳細は弊社までお問い合わせください。

*平成20年3月21日保医発第0321001号等により、一定の要件を満たすことを前提に、弾性着衣の購入は、療養費支給の対象となりました。詳細は、関係省庁や弊社までお問い合わせください。

ナック商会株式会社 URL : www.nakcorp.co.jp
 e-mail : order@nakcorp.co.jp

■大阪本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀5-7-1 3
 tel : 06-6599-9000 fax : 06-6599-9007

■東京オフィス 〒165-0026 東京都中野区新井5-2-2-8
 tel : 03-5343-7955 fax : 03-5343-7956
 お客様相談・注文窓口 : 0120-06-0390